


Ochrona radiologiczna montowana na stole.

Specyfikacje i informacje zamówieniowe



Ochrona radiologiczna montowana na stole · 312/E-021

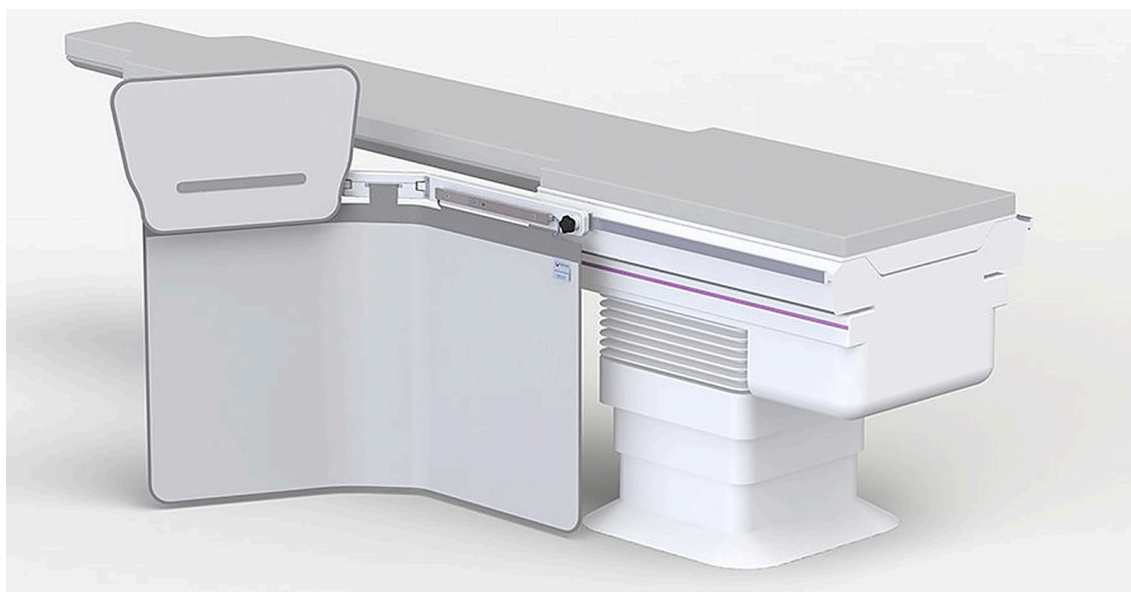

Spis treści


O tej linii produktów	3
Konstrukcja i kluczowe cechy	4
Konfiguracje osłon · 78–162 cm	5
Osłony z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym · 92–162 cm	11
Osłony nakładane · Opcje, wysokości i kompatybilność	15
Osłony od strony głowy	19
Osłona od strony stóp	23
Przechowywanie · Uchwyty ściennie i stojaki mobilne	24
Kontakt	27



O tej linii produktów

Oslony dolnej części ciała KENEX znacznie redukują promieniowanie rozproszone emitowane przez stół lub ciało pacjenta. Składają się z lekkiej, trwałej konstrukcji ze wzmocnionym podwójnym przegubem ciernym lub pojedynczym przegubem ciernym oraz z ramienia obrotowego, które przenosi elastyczną zasłonę ochronną o równoważniku ołowiu 0,5 mm Pb. Opcjonalne, półelastyczne osłony nakładane zapewniają dodatkową ochronę górnej części ciała.


- Wszystkie osłony można montować po obu stronach stołu, tak aby ramię obrotowe zawsze było skierowane w stronę wezglowia.
- Uchwyt mocujący jest nasuwany na szynę stołu i szybko dopasowuje się do szyn o wysokości 25 mm lub 28,6 mm (maks. 11 mm grubości).
- Automatyczna kompensacja zużycia zapewnia stałe tarcie przegubu – także przy stole pochylonym w dowolnym kierunku.
- Zwisająca zasłona tworzy ciągłą strefę ochronną dla radiologów i kardiologów.
- Zasłona układa się wokół lampy rentgenowskiej znajdującej się pod stołem, nie utrudniając ruchu.
- W połączeniu z systemami KENEX montowanymi na suficie ochrona górnej i dolnej części ciała uzupełniają się, tworząc skuteczną barierę przed promieniowaniem rozproszonym.

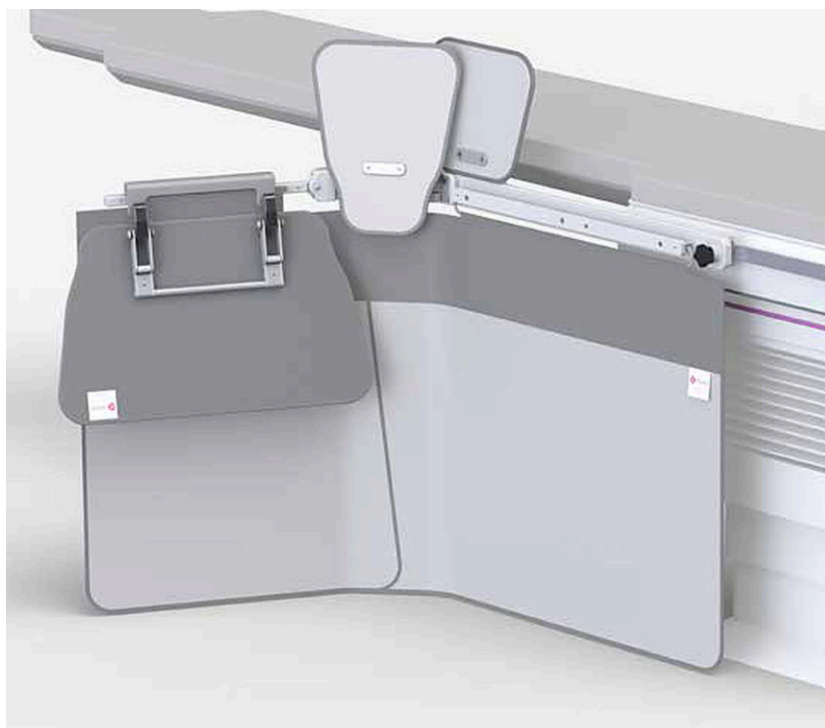

312/DS-039/6/3 · Osłona dolnej części ciała z nakładkami


Konstrukcja & kluczowe cechy

Zintegrowana szyna akcesoriów

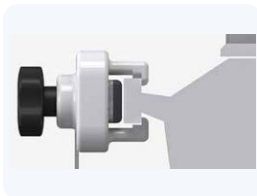

Wszystkie osłony o szerokości od 100 cm są dostarczane z dwiema zintegrowanymi szynami akcesoriów (10×25 mm zamontowana, 9,5×28,6 mm dołączona). Urządzenia sterujące można umieścić blisko użytkownika.

Stabilne sworznie przegubu

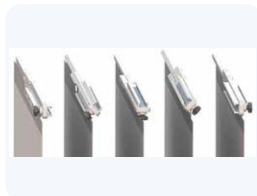

Wewnętrzne sworznie ze stali nierdzewnej (10 mm Ø) pewnie utrzymują komponenty i zapewniają stabilne, trwale obciążalne punkty obrotu.

Montaż obustronny



Wszystkie modele można szybko zamontować po lewej lub prawej stronie stołu i w razie potrzeby przenieść na drugą stronę.

Samoregułujący przegub



Bezobsługowy mechanizm utrzymuje ustawione tarcie i zapobiega niepożądanym ruchom zasłony – zapewniając długą żywotność.

Regulacja szerokości szyny



Bezpieczne mocowanie do szyn stołu o wysokości 25 mm lub 28,6 mm, konfigurowalne na miejscu (maks. 11 mm grubości).

Konstrukcja zasłony



Elastyczny rdzeń wewnętrzny z wytrzymałą powłoką zewnętrzną (0,5 mm Pb) – odporny na zużycie, łatwy do czyszczenia, nie rozwarstwia się. Opcjonalnie jako trzy zachodzące na siebie panele (dodatek /P).

Zabezpieczenie przeciwwkolizyjne



Opatentowany mechanizm: ramię obrotowe odchyła się do góry przy kolizji z ramieniem C – chroniąc osłonę i urządzenie.

Uchwyt z kołnierzem ochronnym



Uchwyt wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, chroniony masywnym kołnierzem wokół trzonu uchwytu.

> Oślony montowane na stole Konfiguracje osłon

Seria KENEX do ochrony dolnej części ciała obejmuje szerokości od 78 cm do 162 cm. Każda osłona jest dostarczana z elastyczną zasłoną ochronną o równoważniku ołowiu 0,5 mm Pb. Oślony nakładane rozszerzają ochronę i w zależności od produktu są już w zestawie lub dostępne osobno (kompatybilność patrz strona 16).

78 cm szerokie osłony

Składa się z:

- Panel zasłony 78 cm szerokości × 70 cm wysokości (opcjonalnie jako trzy zachodzące na siebie panele).
- Pojedynczy przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Oślony nakładane w zestawie w niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/E-006



312/E-006/P · trzy zachodzące na siebie panele



312/E-005

78 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony		Oślony nakładane · 57 cm	
	jednoczęściowy	trzy zachodz.	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down 312/DS/3,33
312/E-005	●			
312/E-005/P		●		
312/E-006	●		●	
312/E-006/P		●	●	
312/E-007	●			●
312/E-007/P		●		●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

92 cm szerokie osłony

Składa się z:

- Panel zasłony 92 cm szerokości × 70 cm wysokości (opcjonalnie jako trzy zachodzące na siebie panele).
- Podwójny przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Osłony nakładane w zestawie w niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/E-011



312/E-012/P



312/E-010

92 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony		Osłony nakładane · 57 cm	
	jednoczęściowy	trzy zachodz.	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down 312/DS/3,33
312/E-010	●			
312/E-010/P		●		
312/E-011	●		●	
312/E-011/P		●	●	
312/E-012	●			●
312/E-012/P		●		●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

100 cm szerokie osłony

Składa się z:


- Panel zasłony 100 cm szerokości × 70 cm wysokości (opcjonalnie jako trzy zachodzące na siebie panele).
- Pojedynczy przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Dwie zintegrowane szyny akcesoriów 35 cm: 10×25 mm (zamontowany) / 9,5×28,6 mm (w komplecie); opcjonalnie 7,7×25 mm.
- Osłony nakładane w zestawie w niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/E-016



312/E-016/P

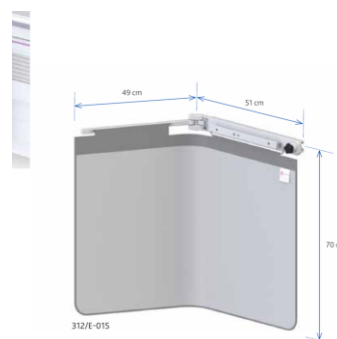

312/E-015

100 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony		Szyna akcesoriów · 35 cm		Osłony nakładane · 57 cm	
	jednoczęściowy	trzy zachodz.	10×25 mm 9,5×28,6 mm	7,7×25 mm	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down 312/DS/3,33
312/E-015	●		●			
312/E-015/P		●	●			
312/E-015/8	●			●		
312/E-015/8P		●		●		
312/E-016	●		●		●	
312/E-016/P		●	●		●	
312/E-016/8	●			●	●	
312/E-016/8P		●		●	●	
312/E-017	●		●			●
312/E-017/P		●	●			●
312/E-017/8	●			●		●
312/E-017/8P		●		●		●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

114 cm szerokie osłony

Składa się z:


- Panel zasłony 114 cm szerokości × 70 cm wysokości (opcjonalnie jako trzy zachodzące na siebie panele).
- Podwójny przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Dwie zintegrowane szyny akcesoriów 35 cm: 10×25 mm (zamontowany) / 9,5×28,6 mm (w komplecie); opcjonalnie 7,7×25 mm.
- Osłony nakładane w zestawie w niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/E-020



312/E-020/3

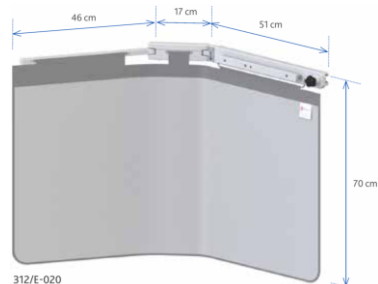

312/E-020

114 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony		Szyna akcesoriów · 35 cm		Osłony nakładane · 57 cm		Osłony nakładane · 27 cm	
	jednoczęściowy	trzy zachodz.	10×25 mm 9,5×28,6 mm	7,7×25 mm	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down 312/DS/3,33	Lift-off 312/DS/3,30	Lift-off 312/DS/3,41
312/E-020	●		●					
312/E-020/P		●	●					
312/E-020/8	●			●				
312/E-020/8P		●		●				
312/E-020/3	●		●		●		●	●
312/E-020/3/P		●	●		●		●	●
312/E-020/3/8	●			●	●		●	●
312/E-020/3/8P		●		●	●		●	●
312/E-021	●		●		●			
312/E-021/P		●	●		●			
312/E-021/8	●			●	●			
312/E-021/8P		●		●	●			
312/E-022	●		●			●		
312/E-022/P		●	●			●		
312/E-022/8	●			●		●		
312/E-022/8P		●		●		●		

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

137 cm szerokie osłony

Składa się z:


- Panel zasłony 137 cm szerokości × 75 cm wysokości.
- Podwójny przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Dwie zintegrowane szyny akcesoriów 57 cm: 10×25 mm (zamontowany) / 9,5×28,6 mm (w komplecie).
- Osłony nakładane w zestawie w niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/DS-039/4



312/DS-039/4/3

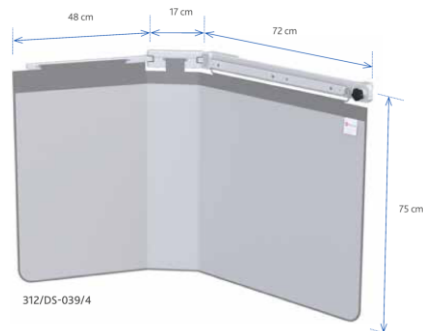

312/DS-039/4

137 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony	Szyna akcesoriów · 57 cm	Osłony nakładane · 57 cm		Osłony nakładane · 27 cm	
	jednoczęściowy	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/DS-039/4	●	●				
312/DS-039/4/3	●	●		●	●	●
312/DS-0412/4	●	●	●		●	●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

162 cm szerokie osłony

Składa się z:


- Panel zasłony 162 cm szerokości × 75 cm wysokości.
- Dwa podwójne przeguby cierne do precyzyjnego pozycjonowania.
- Dwie zintegrowane szyny akcesoriów 57 cm: 10×25 mm (zamontowany) / 9,5×28,6 mm (w komplecie).
- Osłony nakładane w zestawie w niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/DS-039/9



312/DS-039/9/4

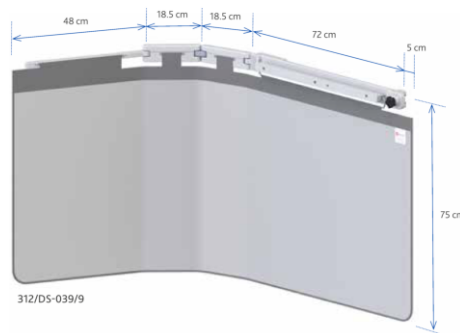

162 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony	Szyna akcesoriów · 57 cm	Osłony nakładane · 57 cm	Osłony nakładane · 27 cm	
	jednoczęściowy	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/DS-039/9	●	●			
312/DS-039/9/4	●	●	●	● ×2	●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

> Konfiguracje z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym

Osłony dolnej części ciała z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym posiadają opatentowany mechanizm: Ramię obrotowe odchyła się do góry przy kolizji z ramieniem C – dzięki czemu ani ramię C, ani osłona nie ulegają uszkodzeniu, a badanie nie zostaje przerwane. Każda osłona jest dostarczana z elastyczną zasłoną ochronną 0,5 mm Pb.

92 cm · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym

Składa się z:

- Panel zasłony 92 cm szerokości × 70 cm wysokości (312/DS-008 & /3: 75 cm; opcjonalnie trzy zachodzące panele).
- Podwójny przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Opatentowane zabezpieczenie przeciwkolizyjne – ramię obrotowe odchyła się do góry przy kolizji.
- Osłony nakładane w zestawie przy niektórych produktach – kompatybilność patrz strona 16.



312/E-013



312/DS-008



312/DS-008

92 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony		Osłony nakładane · 57 cm		Osłony nakładane · 27 cm
	dwuczęściowy	trzy zachodz.	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3,115	Lift-off 312/DS/3,30
312/E-013	●		●		
312/E-013/P		●	●		
312/DS-008	●				
312/DS-008/3	●			●	● ×2

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

114 cm · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym

Składa się z:


- Panel zasłony 114 cm szerokości × 70 cm wysokości (opcjonalnie trzy zachodzące panele).
- Podwójny przegub cierny do precyzyjnego pozycjonowania.
- Dwie zintegrowane szyny akcesoriów 35 cm: 10×25 mm (zamontowany) / 9,5×28,6 mm (w komplecie); opcjonalnie 7,7×25 mm.
- Opatentowane zabezpieczenie przeciwkolizyjne; osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16.



312/E-023



312/E-023/P

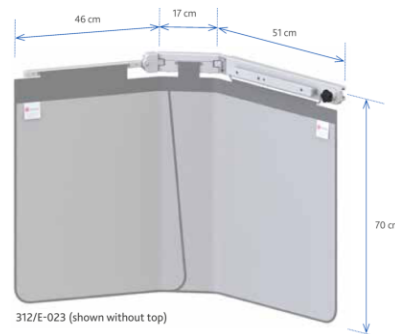

114 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony		Szyna akcesoriów · 35 cm		Osłony nakładane · 57 cm
	dwuczęściowy	trzy zachodz.	10×25 mm 9,5×28,6 mm	7,7×25 mm	Lift-off 312/DS/3,32
312/E-023	●		●		●
312/E-023/P		●	●		●
312/E-023/8	●			●	●
312/E-023/8P		●		●	●


● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

137 cm · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym

Wersja standardowa



312/DS-039/6

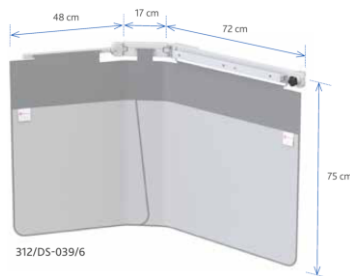

137 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony	Szyna akcesoriów · 57 cm	Osłony nakładane · 57 cm		Osłony nakładane · 27 cm	
	dwuczęściowy	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/DS-039/6	●	●				
312/DS-039/6/3	●	●		●	●	●
312/DS-0412/6	●	●	●		●	●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

Do stołów przesuwanych bocznie · głęboki uchwyt


Głęboki uchwyt mocujący do poprzecznego ruchu stołu. Panel zasłony 137 cm × 75 cm, podwójny przegub czarny; dwie szyny akcesoriów 65 cm.



312/DS-060



boczny ruch stołu

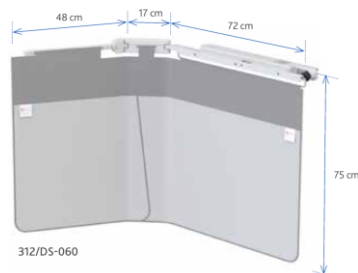

137 cm · głęboki uchwyt Kod produktu	Panel zasłony	Szyna akcesoriów · 65 cm	Osłony nakładane · 57 cm		Osłony nakładane · 27 cm	
	dwuczęściowy	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.122
312/DS-060	●	●				
312/DS-060/1/3	●	●		●	●	●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16

162 cm · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym

Składa się z:


- Panel zasłony 162 cm szerokości × 75 cm wysokości.
- Dwa podwójne przeguby cierne do precyzyjnego pozycjonowania.
- Dwie zintegrowane szyny akcesoriów 57 cm: 10×25 mm (zamontowany) / 9,5×28,6 mm (w komplecie).
- Opatentowane zabezpieczenie przeciwkolizyjne; osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16.



312/DS-039/10



312/DS-039/10/4

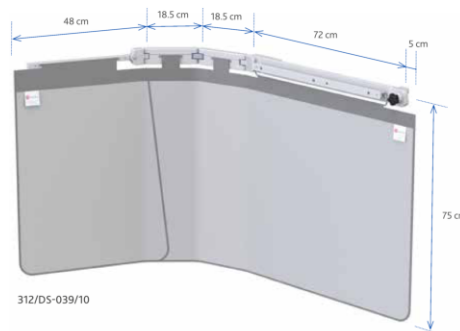

162 cm szerokości Kod produktu	Panel zasłony	Szyna akcesoriów · 57 cm	Osłony nakładane · 57 cm	Osłony nakładane · 27 cm	
	dwuczęściowy	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/DS-039/10	●	●			
312/DS-039/10/4	●	●	●	● ×2	●

● w zestawie · Dostępne dalsze osłony nakładane – kompatybilność patrz strona 16



Osłony montowane na stole

Osłony nakładane – opcje

Osłony nakładane KENEX są wykonane z tego samego materiału ochronnego 0,5 mm Pb co zasłony osłony głównej. Elastyczne tworzywo sztuczne pozwala im wystawać 25 cm poza szynę stołu i zapewnia dodatkową, wyższą i szerszą ochronę. Ich specjalny kształt – szersze u góry – zapobiega powstawaniu szczelin przy zsuwaniu. Kompatybilność osłon nakładanych i głównych znajduje się na kolejnych stronach.

Nakładki Lift-off

Masywne stalowe kołki centrujące utrzymują nakładki pewnie w pozycji. Skrócone nakładki o szerokości 27 cm są wykonane krócej, aby nie przeszkadzać urządzeniom sterującym na szynie.



**312/DS/3.32 ·
Lift-off 57 cm**



**312/DS/3.30 ·
Lift-off 27 cm**



**312/DS/3.41 ·
Lift-off 27 cm
(skrócony)**

Nakładki Fold-down

Nakładki Fold-down 57 cm można szybko odchylać dla łatwiejszego dostępu do pacjenta – bez zdejmowania i przekładania. Nakładki Fold-down/Lift-off można dodatkowo zdejmować i odkładać na opcjonalny uchwyt ścienny (patrz rozdział Przechowywanie).



Położenie nakładek 312/DS-039/6/3



312/DS/3.33 · Fold-down 57 cm

Zestawy nakładek

312/E-025 · Zestaw o wysokości standardowej

Zestaw trzech nakładek Lift-off o wysokości standardowej. Wysokość 25 cm nad szyną akcesoriów.

Kompatybilny z 312/E-020, /E-021, /E-022, /E-023, 312/DS-039/6 i warianty.



312/E-027 · Zestaw o wysokości zmniejszonej

Zestaw trzech nakładek Lift-off o wysokości zmniejszonej. Wysokość 15 cm nad szyną akcesoriów.

Kompatybilny z 312/E-020, /E-021, /E-022, /E-023, 312/DS-039/6 i warianty.



Oslony nakładane **Wysokości i typy**

Oslony nakładane są dostępne w wysokości standardowej (25 cm nad szyną akcesoriów) oraz zmniejszonej (15 cm) – każda o szerokości 57 cm lub 27 cm. Poniższe zestawienie porządkuje każdą nakładkę według wysokości, szerokości i wykonania; odpowiednią kompatybilność osłon podano na kolejnych stronach.

Wysokość standardowa · 25 cm

57 cm szerokości



312/DS/3.32/3
Lift-off



312/DS/3.32
Lift-off



312/DS/3.33
Fold-down



312/DS/3.115
Fold-down / Lift-off

Wysokość zmniejszona · 15 cm

57 cm szerokości



312/DS/3.106
Lift-off



312/DS/3.128
Lift-off



312/DS/3.139
Fold-down



312/DS/3.167
Fold-down / Lift-off

27 cm szerokości



312/DS/3.30
Lift-off



312/DS/3.41
Lift-off (skrócony)



312/DS/3.122
Lift-off (skrócony)

27 cm szerokości



312/DS/3.108
Lift-off



312/DS/3.110
Lift-off (skrócony)



312/DS/3.130
Lift-off (skrócony)



Osłony nakładane

Kompatybilność · 57 cm

☒ w zestawie z osłoną
 ☐ kompatybilny / opcjonalny
 ☐ ×2 można zamontować dwie

Kod produktu	Osłony nakładane szerokości 57 cm							
	Lift-off (przeciwkolizyjny)		Lift-off		Fold-down (zdejmowany, nie Lift-off)		Fold-down / Lift-off	
	Wysokość standardowa 312/DS/3.32/3	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.106	Wysokość standardowa 312/DS/3.32	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.128	Wysokość standardowa 312/DS/3.33	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.139	Wysokość standardowa 312/DS/3.115	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.167
78 cm szerokości								
312/E-005			☐	☐	☐	☐		
312/E-006			☒	☐	☐	☐		
312/E-007			☐	☐	☒	☐		
92 cm szerokości								
312/E-010			☐	☐	☐	☐		
312/E-011			☒	☐	☐	☐		
312/E-012			☐	☐	☒	☐		
100 cm szerokości								
312/E-015			☐	☐	☐	☐		
312/E-016			☒	☐	☐	☐		
312/E-017			☐	☐	☒	☐		
114 cm szerokości								
312/E-020			☐	☐	☐	☐		
312/E-021			☒	☐	☐	☐		
312/E-022			☐	☐	☒	☐		
137 cm szerokości								
312/DS-039/4			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/4/3			☐	☐			☒	☐
312/DS-0412/4			☒	☐			☐	☐
162 cm szerokości								
312/DS-039/9			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/9/4			☐	☐			☒	☐
92 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym								
312/E-013			☒	☐			☐	☐
312/DS-008			☐	☐			☐	☐
312/DS-008/3			☐	☐			☒	☐
114 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym								
312/E-023			☒	☐			☐	☐
137 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym								
312/DS-039/6			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/6/3			☐	☐			☒	☐
312/DS-0412/6			☒	☐			☐	☐
312/DS-060			☐	☐			☐	☐
312/DS-060/1/3			☐	☐			☒	☐
162 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym								
312/DS-039/10			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/10/4			☐	☐			☒	☐



Osłony nakładane

Kompatybilność · 27 cm

☒ w zestawie z osłoną
 ☐ kompatybilny / opcjonalny
 ☐ ×2 można zamontować dwie

Kod produktu	Osłony nakładane szerokości 27 cm					
	Lift-off		Lift-off (skrócony)		Lift-off (skrócony)	
	Wysokość standardowa 312/DS/3.30	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.108	Wysokość standardowa 312/DS/3.41	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.110	Wysokość standardowa 312/DS/3.122	Wysokość zmniejszona 312/DS/3.130
78 cm szerokości						
312/E-005	☐	☐				
312/E-006	☐	☐				
312/E-007	☐	☐				
92 cm szerokości						
312/E-010	☐ ×2	☐ ×2				
312/E-011	☐ ×2	☐ ×2				
312/E-012	☐ ×2	☐ ×2				
100 cm szerokości						
312/E-015			☐	☐		
312/E-016			☐	☐		
312/E-017			☐	☐		
114 cm szerokości						
312/E-020	☐	☐	☐	☐		
312/E-021	☐	☐	☐	☐		
312/E-022	☐	☐	☐	☐		
137 cm szerokości						
312/DS-039/4	☐	☐	☐	☐		
312/DS-039/4/3	☒	☐	☒	☐		
312/DS-0412/4	☒	☐	☒	☐		
162 cm szerokości						
312/DS-039/9	☐ ×2	☐ ×2	☐	☐		
312/DS-039/9/4	☒ ×2	☐ ×2	☒	☐		
92 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym						
312/E-013	☐ ×2	☐ ×2				
312/DS-008	☐ ×2	☐ ×2				
312/DS-008/3	☒ ×2	☐ ×2				
114 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym						
312/E-023	☐	☐	☐	☐		
137 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym						
312/DS-039/6	☐	☐	☐	☐		
312/DS-039/6/3	☒	☐	☒	☐		
312/DS-0412/6	☒	☐	☒	☐		
312/DS-060	☐	☐			☐	☐
312/DS-060/1/3	☒	☐			☒	☐
162 cm szerokości · z zabezpieczeniem przeciwkolizyjnym						
312/DS-039/10	☐ ×2	☐ ×2	☐	☐		
312/DS-039/10/4	☒ ×2	☐ ×2	☒	☐		

Ośłony montowane na stole

Ośłony od strony głowy

Ośłony od strony głowy znacząco redukują promieniowanie rozproszone pochodzące od stołu lub ciała pacjenta. Składają się z lekkiej, trwałej konstrukcji z elastyczną zasłoną ochronną o równoważniku ołowiu 0,5 mm Pb.

- Oślona jest nasuwana na blat węgłowy i utrzymuje swoją pozycję nawet przy przechylonym stole.
- Odchylane skrzydła boczne można formować wokół użytkownika, wysuwać pojedynczo do przodu lub składać dla oszczędności miejsca; ramiona obrotowe można szybko przestawiać dla pełnego ruchu ramienia C.
- Każda oślona jest wykonana dla określonego stołu i opcjonalnie dostępna z przechowywaniem ściennym.

313/A2 · Ośłony od strony głowy wykonywane na wymiar

Indywidualne rozwiązania w zależności od rozmiaru i typu stołu. Uwaga: Przy zamówieniu należy wypełnić arkusz pomiarowy (dostępny jako PDF na stronie produktu lub na zapytanie).

Kod produktu	Uchwyt ścienny
313/A2 · wymagany arkusz pomiarowy	☐

☒ w zestawie · ☐ opcjonalnie

313/A2-001 & 313/A2-008 · do Siemens Healthineers Artis zee

313/A2-001 · 120 cm szerokości

1× 56 cm stała sekcja środkowa · 2× 32 cm ramiona obrotowe · 80 cm zasłona · uchwyt ścienny




313/A2-001



złożona · uchwyt ścienny

313/A2-008 · 122 cm szerokości

1× 58 cm stała sekcja środkowa · 2× 32 cm ramiona obrotowe · 80 cm zasłona · uchwyt ścienny

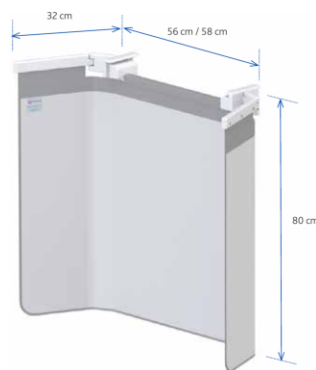

Kod produktu	Uchwyt ścienny
313/A2-001 · do 525 mm Artis / 520 mm TruSystem 7500 (Artis zee)	☒
313/A2-008 · do 550 mm Artis zee Multipurpose (MP)	☒

☒ w zestawie · ☐ opcjonalnie

313/A2-010 · do GE Healthcare Elegance


Składa się z: 1× uchwyt adaptera stołu · 1× 37 cm stała sekcja środkowa · 2× ramiona obrotowe (24 & 68 cm szerokości) · 60 cm zasłona · 3× 29 cm nakładki Lift-off · uchwyt ścienny.



313/A2-010 · bez nakładek



313/A2-010 · uchwyt ścienny

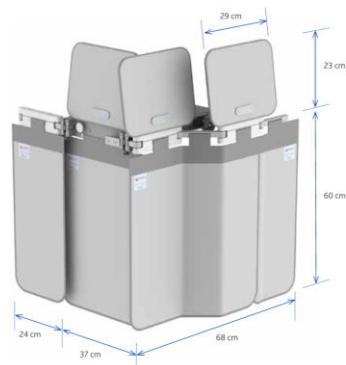


Kod produktu	Uchwyt ścienny	29 cm nakładki Lift-off
313/A2-010 · do GE Healthcare Elegance	☒	☒ ×3

☒ w zestawie · ☐ opcjonalnie

313/A2-014 · do Canon Medical (Toshiba) CAT-880B

114 cm szerokości · 1× 50 cm stała sekcja środkowa · 2× 32 cm ramiona obrotowe · 78,5 cm zasłona · uchwyt ścienny.

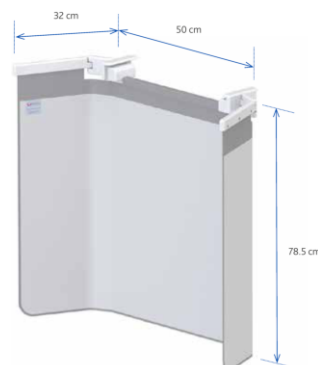**313/A2-014****złożona****Kod produktu**



313/A2-014 · do 450 mm stołu uchylno-kołyskowego CAT-880B

Uchwyt ścienny

☒ w zestawie · ☐ opcjonalnie

313/A2-018 · do Baxter Carbon FloatLine & SQ14 X-TRA

120 cm szerokości · 1× 56 cm stała sekcja środkowa · 2× 32 cm ramiona obrotowe · 80 cm zasłona · uchwyt ścienny.

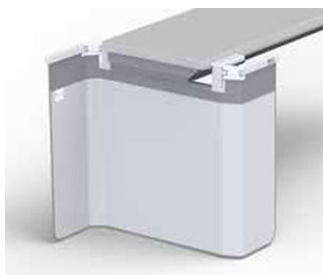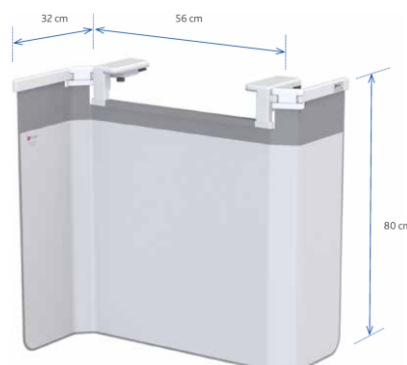**313/A2-018****Kod produktu**

313/A2-018 · do 520 mm Carbon FloatLine & SQ14 X-TRA

Uchwyt ścienny

☒ w zestawie · ☐ opcjonalnie

313/A3 · do Philips Allura AD7


Składa się z: 121 cm szerokości · 1× 57 cm stała sekcja środkowa · 2× 32 cm ramiona obrotowe · 80 cm zasłona · 1× 57 cm nakładka Fold-down.



313/A3-001



313/A3-002 · uchwyt ścienny

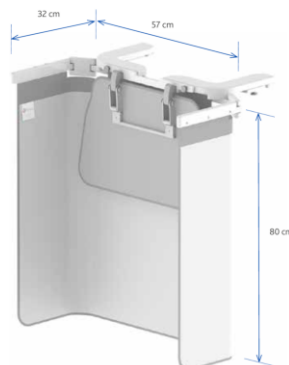

Kod produktu	Uchwyt ścienny	57 cm nakładka Fold-down
313/A3-001 · do 500 mm Allura AD7	☐	☒
313/A3-002 · do 500 mm Allura AD7 (z uchwytem ściennym)	☒	☒

☒ w zestawie · ☐ opcjonalnie

> Osłony montowane na stole

Osłona od strony stóp

Górna osłona od strony stóp chroni przed promieniowaniem rozproszonym oraz dodatkowo przed możliwymi rozpryskami krwi podczas zabiegów interwencyjnych.

- Do stosowania w poprzek stołu od strony stóp.
- Pasuje do obu szyn stołu o wysokości 25 mm (grubości 7,7–10 mm).
- Ciągły równoważnik ołowiu: 0,5 mm Pb.

Uwaga: Przy zamówieniu należy wypełnić arkusz pomiarowy (dostępny jako PDF na stronie produktu lub na zapytanie).

311/TC/004 · Górna osłona stołu od strony stóp

1× Okno z akrylu ołowiowego ok. 60 cm wysokości × 80 cm szerokości · 1× elastyczna zasłona ochronna pod akrylem, 20 cm wysokości · 2× uchwyty do pozycjonowania.



311/TC/004



311/TC/004



Osłony montowane na stole

Przechowywanie · Uchwyt ścienny

312/W-LBT · Zestaw uchwytów ściennych

Zestaw uchwytów ściennych, składający się z:

- 1× 312/W-LB (do osłony dolnej części ciała)
- 1× 312/W-TOP (do osłon nakładanych)




312/W-LBT

312/W-LB · Uchwyt ścienny do osłony dolnej części ciała

Praktyczne miejsce przechowywania, gdy osłony są zdjęte ze stołu. Mocowanie na 1× osłonę dolnej części ciała KENEX (typ 312).




312/W-LB

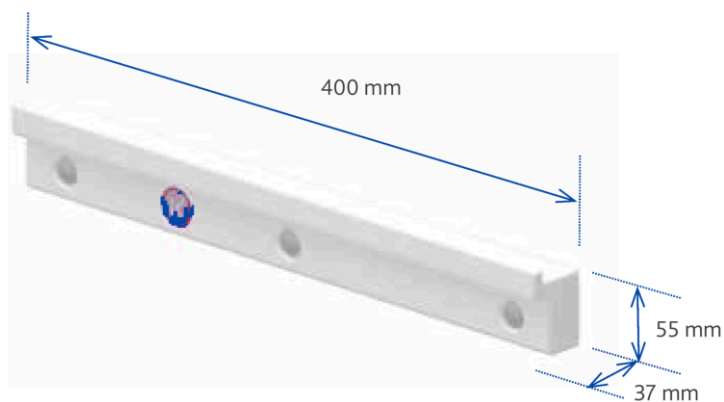

312/W-TOP · Uchwyt ścienny do osłon nakładanych

Miejsce przechowywania zdjętych osłon nakładanych. Mocowanie na 1× 57 cm + 2× 27 cm osłony nakładane.

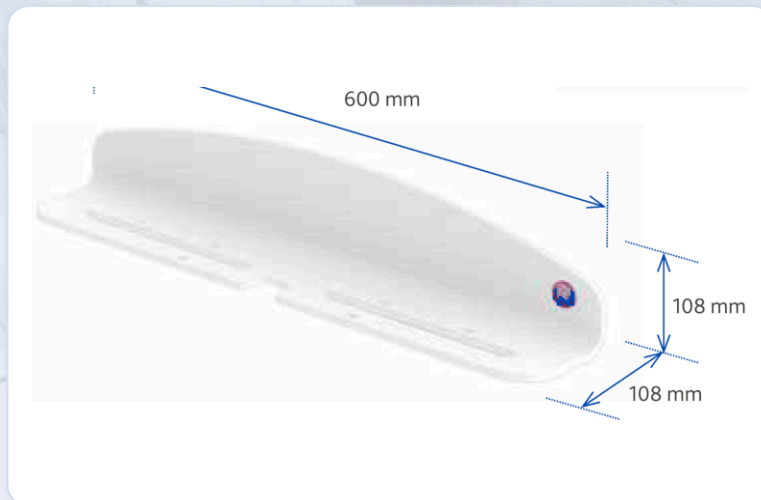

Kompatybilność · osłony nakładane 57 cm

Kod produktu	312/DS/3.32/3	312/DS/3.106	312/DS/3.32	312/DS/3.128	312/DS/3.33	312/DS/3.139	312/DS/3.115	312/DS/3.167
312/W-TOP	☐	☐	☐	☐			☐	☐

Kompatybilność · osłony nakładane 27 cm

Kod produktu	312/DS/3.30	312/DS/3.108	312/DS/3.41	312/DS/3.110	312/DS/3.122	312/DS/3.130
312/W-TOP	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ kompatybilny

> Oślony montowane na stole Przechowywanie · Stojaki mobilne

Stojaki mobilne dla oddziałów z małą lub nieodpowiednią przestrzenią na uchwyty ściennie. Mała powierzchnia w pozycji zaparkowanej, duże kółka jezdne z blokadą z osłoną przednią chroniącą przed kablami na podłodze oraz ciężka, stabilna podstawa.

1342/A2/E-001

1× osłona stołu (Typ 312) · 1× zestaw nakładek (1×57 + 2×27 cm) · 1× osłona od strony głowy (313/A2-008 lub 313/A2-001)



1342/A2/E-001

1342/A3/E-001

1× osłona stołu (Typ 312) · 1× zestaw nakładek (1×57 + 2×27 cm) · 1× osłona od strony głowy (313/A3-001)



1342/A3/E-001

1342/A2/F

2× osłony dolnej części ciała (Typ 312) · 2× zestawy nakładek (2×57 + 4×27 cm)



1342/A2/F



Kod produktu	Osłona dolnej części ciała Typ 312	Osłona od strony głowy Typ 313	Zestaw nakładek 1×57 + 2×27 cm
1342/A2/E-001 · kompatybilny z osłoną od strony głowy 313/A2-008 & 313/A2-001	☐	☐	☐
1342/A3/E-001 · kompatybilny z osłoną od strony głowy 313/A3-001	☐	☐	☐
1342/A2/F	☐ ×2		☐ ×2 zestawy

☐ kompatybilny

KONTAKT

Twój partner w zakresie ochrony radiologicznej.

Pośredniczymy w sprzedaży i dostarczamy certyfikowane wyroby medyczne. Ponadto, niezależnie od producenta, sprowadzamy niemal każdy produkt i kompleksowo wyposażamy całe obszary w ramach projektów.

medeqon GmbH

Biuro inżynierskie techniki medycznej

Bergstrasse 42/5/3

2102 Hagenbrunn · Austria

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com