



ROTHBAND



PRODUKT- PORTFOLIO Strahlenschutzrüstung &
zugehörige Produkte

AUSGABE 2025 / 26

WELTWEIT FÜHREND BEI STRAHLENSCHUTZLÖSUNGEN



MIT LEIDENSCHAFT FÜR Strahlenschutz

Wenn es um Röntgenschutz geht, Rothband ist ein Name, dem Sie vertrauen können

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Röntgenschutzkleidung können Sie sicher sein, dass Sie sich bei uns für ein Unternehmen entscheiden, das mit Leidenschaft Strahlenschutz für medizinisches Fachpersonal bietet.

Alle Rothband-Produkte werden in Großbritannien nach höchsten Standards und aus Materialien höchster Qualität gefertigt, die uns helfen, einige der langlebigsten Produkte auf dem Markt herzustellen.

Im Laufe der Jahre haben wir unser Portfolio erweitert und bieten neben diesem Schutzkatalog nun einen separaten Zubehörkatalog an, der bei Ihrem örtlichen Rothband-Vertreter erhältlich ist.

*Our products are
manufactured in the UK,
to the very highest standards,
using the highest quality
höchster
Qualität.*





Inhalt

We have a dedicated customer services team on hand to talk through any questions you may have about our products

Einführung

- 1 Über uns Kurze
- 4 Geschichte
- 5 Qualitätsstandards

Informationen

- 6 Textilien
- 7 KERNMATERIALIEN
- 8 Größen

Strahlenschutz

- 10 Frontschürzen Tabard-
- 12 Schürzen Voll
- 14 umschließende
- 16 Wickelschürzen
- 18 Wickeloberteile und Kilts
- 19 Endurance-Oberteile Voll
- 20 umschließendes Oberteile
- 20 und Kilt
- 20 SCHILDDRÜSENSCHUTZ
- 21 Zubehörprodukte
- 22 Mammo-Shield
- Schürzenaufbewahrung



Kurze Geschichte

Mit einer Geschichte, die über 100 Jahre zurückreicht, Rothband ist ein Name, dem Sie vertrauen können



*Rothband, der Erste, der Gummi für die
Röntgenabschirmung mit Blei versah.*

*Der ursprüngliche Hersteller von
Strahlenschutz.*

Die Ursprünge von Rothband reichen bis ins frühe 19. Jahrhundert in Manchester zurück, wo das Unternehmen mit der Herstellung wasserdichter Stoffprodukte wie Kulturbbeutel und Schwammtaschen begann. Um die Jahrhundertwende hatte es sich auf die Herstellung von Gummibahnen unter der Marke „WSRM“ ausgeweitet und belieferte weltweit Einrichtungen wie Krankenhäuser, Heilanstalten und Schulen.

Im frühen 20. Jahrhundert leistete Rothband Pionierarbeit beim Einsatz von röntgendichtem Stoff und trat damit in den Bereich der medizinischen Bildgebung ein. Diese Innovation legte den Grundstein für den heutigen Fokus auf Strahlenschutz. Im Laufe der Jahre wurde Rothband zu einem führenden britischen Hersteller von schützenden Bleischürzen und anderen Abschirmlösungen für die Radiologie und beliefert landesweit NHS-Krankenhäuser und Privatkliniken.

Heute ist Rothband von seinem Standort in Haslingden, Lancashire, aus tätig und setzt sein über 160-jähriges Erbe in der medizinischen Fertigung fort. Mit dem Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenservice bleibt Rothband ein vertrauenswürdiger Name im Strahlenschutz – sowohl in Großbritannien als auch international.





Qualitätsstandards

Bei Rothband haben Sicherheit und Konformität höchste Priorität.

Die aktuelle europäische Norm IEC 61331-1:2014 BBG* legt fest, wie die Abschirmeigenschaften von Strahlenschutzmaterialien gemessen werden müssen. Ein zentrales Element dieser Norm ist die Verwendung der inversen Breitstrahlgeometrie, die hilft, sekundäre Fluoreszenzstrahlung zu erkennen – besonders relevant für bleireduzierte oder bleifreie Materialien. Diese niederenergetischen Emissionen sind biologisch aktiv und können ein erhebliches Risiko darstellen, weshalb die strikte Einhaltung der Norm unerlässlich ist.

Hersteller müssen einen gleichbleibenden Schutz über den gesamten Bereich der Röntgenröhrenspannungen nachweisen, typischerweise von 50 kV bis 110 kV oder sogar bis zu 150 kV.

Dies ist entscheidend, da der Schutz sowohl am unteren als auch am oberen Ende dieses Bereichs erheblich abnehmen kann, insbesondere bei der Verwendung alternativer Abschirmmaterialien. Bei Rothband testen wir unsere Kleidung streng, um die vollständige Konformität und optimale Leistung über dieses gesamte Spektrum sicherzustellen.

Unsere Röntgenschutzkleidung erfüllt außerdem die Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/425/EWG, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) regelt. Es genügt nicht, dass Produkte das CE-Zeichen tragen – sie müssen zusätzlich die vierstellige Kennnummer der benannten Zertifizierungsstelle aufweisen, die die vollständige behördliche Zulassung bestätigt.

Wenn Sie sich für Rothband entscheiden, wählen Sie ein Unternehmen, das über ein Jahrhundert Innovation mit kompromisslosen Standards verbindet. Unser Engagement für Qualität stellt sicher, dass medizinisches Fachpersonal und Patienten gleichermaßen mit Ausrüstung geschützt werden, die höchste Sicherheits- und Zertifizierungsniveaus erfüllt.

To see our certifications and Declarations of Conformity please visit www.rothband.com

CE 2895



WIR HEBEN UNS AB

UNIFARBEN



KÖNIGSBLAU



MARINEBLAU



ORANGE



ROSE




BORDEAUX



Beere



ROT

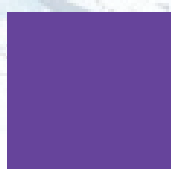

VIOLETT



GRAU




HELLGRÜN



WALDGRÜN



KHAKI

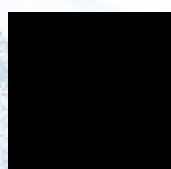

SCHWARZ



GELB

MUSTER



ZEBRA




TARTAN




STERNE




SAFARI

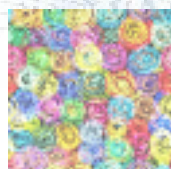

WIRBEL

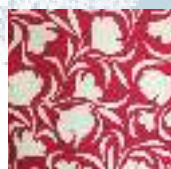

PINK BLUME

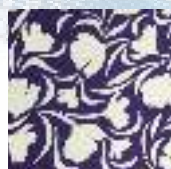


VIOLETT
BLUME



FEUERWERK



FLAMMEN

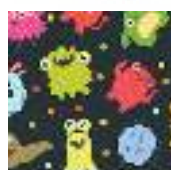

KINDERMOTIVE



FARBSPRITZER



PINK
CAMO



GRAU
CAMO



BLAU
CAMO

EINFASSUNG



SCHWARZ ROT BLAU GRÜN



DUNKELPINK NEONPINK PETROL ORANGE



**WIR
ERWEITERN
STÄNDIG UNSER
STOFFANGEBOT**
Scannen Sie
den Link
unten, um das
gesamte
Angebot zu
sehen.



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

LEAD- LT Leichtes Blei 60 – 150 kV

Standard-Bleischutzmaterial
Hochwertig, flexibel

Strapazierfähige Vinylmatrix für
lang anhaltenden Schutz.

Für Anwendungen im oberen
Röntgenröhren-Spannungsbereich,
z. B. CT-Anwendungen

Konform mit den Normen:
IEC 61331-1:2014 BBG*

BILAYER-ET Erdmetall-Bilayer 60 – 110 kV

Die Bilayer-Konstruktion bietet ein
besseres Schutzniveau als
zusammengesetzte bleifreie
Kernmaterialien.

Hervorragende Bewertung
hinsichtlich Gewicht und
Strahlenschutz.

Tested radiation protection in the X-ray
tube voltage range of 60 - 110 kV

Konform mit den Normen:
IEC 61331-1:2014 BBG*

BILAYER-LF Bleifreier Bilayer 60 – 110 kV

Die Bilayer-Konstruktion bietet ein
besseres Schutzniveau als
zusammengesetzte bleifreie
Kernmaterialien.

Bleifreies Schutzmaterial.
Hervorragende Bewertung
hinsichtlich Gewicht und
Strahlenschutz.

Tested radiation protection in the X-ray
tube voltage range of 60 - 110 kV

Konform mit den Normen:
IEC 61331-1:2014 BBG*

		δm BBG mm					Target Weight Kg/M ²
	Lead Equivalence	60 kVp	70 kVp	90 kVp	110 kVp	150 kVp	
LEAD-LT	0.25 mm Pb	0.241	0.241	0.241	0.244	0.246	3.43
	0.35 mm Pb	0.342	0.344	0.347	0.346	0.349	4.80
	0.5 mm Pb	0.490	0.492	0.495	0.5	0.496	6.60
BILAYER-ET	0.25 mm Pb	0.250	0.262	0.259	0.244		2.90
	0.35 mm Pb	0.425	0.392	0.346	0.345		4.05
	0.5 mm Pb	0.651	0.618	0.572	0.519		5.8
BILAYER-LF	0.25 mm Pb	0.232	0.272	0.304	0.294		2.83
	0.35 mm Pb	0.326	0.386	0.433	0.394		4.12
	0.5 mm Pb	0.575	0.566	0.567	0.518		5.66


Prüfung gemäß BS EN 61331-1:2014 BBG* unter Verwendung der inversen
Breitstrahlengewichte in der Orientierung und alle Materialien haben die
relevanten Prüfungen bestanden.

* Das Ansprechen der Ionisationskammer war zu gering, um einen Wert genau zu erfassen. Dieser Wert wurde durch eine lineare Anpassung der 70–150-kV-
Werte extrapoliert. ** Die Gewichte basieren auf Prüfungen bis 110 kV und sind Richtwerte. Die Prüfungsgewichte bis 150 kV sind schwerer als hier angegeben.



Größen Informationen

Offenes Design Geschlossenes Design									
Das Kleidungsstück bietet vollen Schutz in Panelen mit einem Spalt an jeder Seite.				Überlappung Das Kleidungsstück bietet doppelten Schutz nur im Überlappungsbereich.			Voller Frontschutz Das Kleidungsstück bietet doppelten Schutz für die gesamten 60 % der Vorderseite des Kleidungsstücks.		
Nur-Front-Schutz Tabard Schürze OBERTEIL KILT Schürze OBERTEIL KILT									
VXR-1	VXR-2	PXR-SC	PXR-TH	WXR	TXR-W	KXR-W	WXRF	TXR-F	KXR-F
					TXR-W LITE			TXR-B	

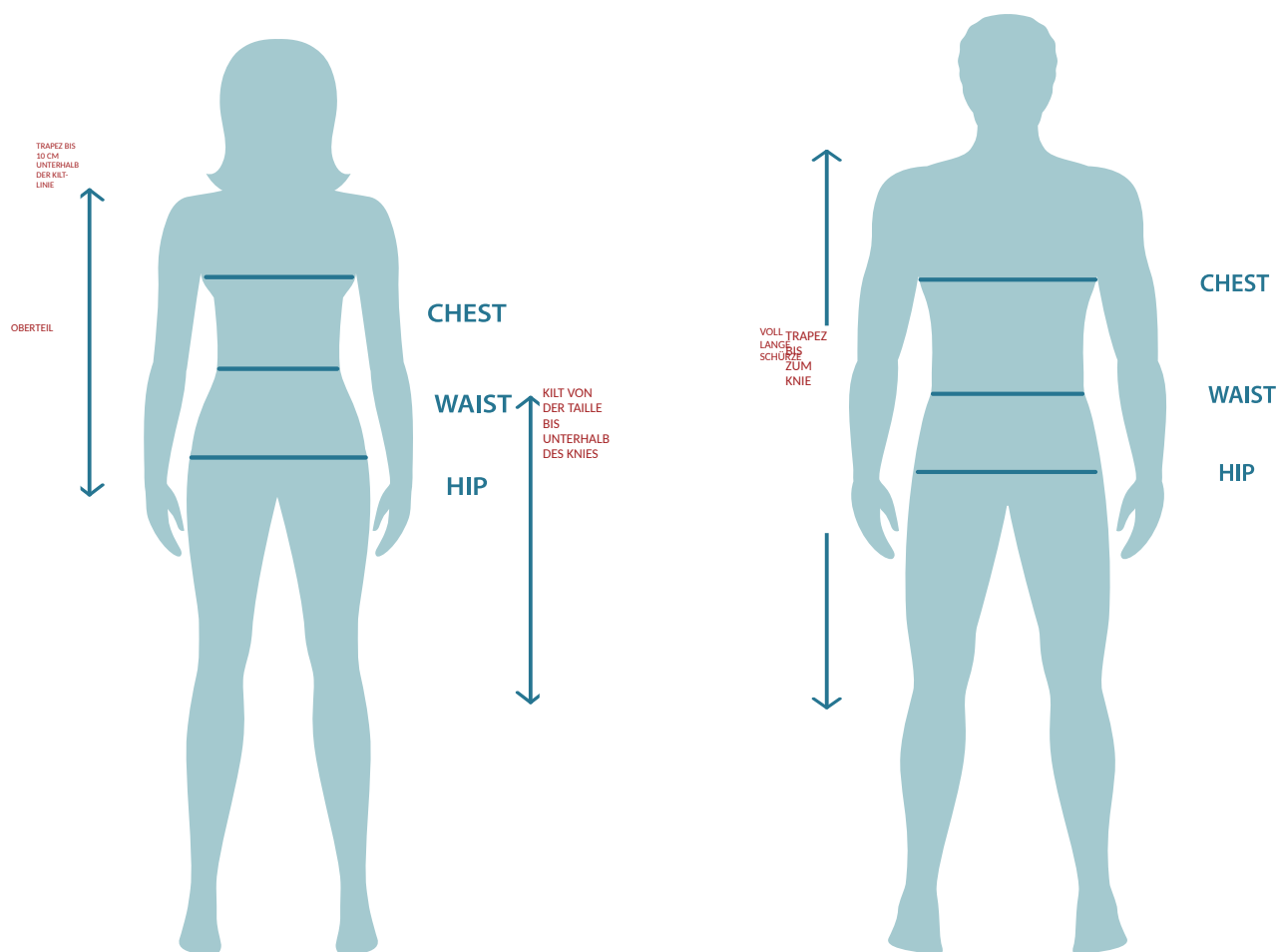

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Chest Measurement	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170
Waist Measurement	48-57	58-68	68-78	78-88	88-98	98-108	108-118	118-128	128-138	138-148
Hip Measurement	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170

Voll lange Kleidungsstücke Alle Maße berücksichtigen und das größte wählen

Oberteile Alle Maße berücksichtigen und das größte wählen

Kilts Taillen- und Hüftmaß berücksichtigen und das größte wählen



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com




NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

Durch den Einsatz maßgeschneiderter, avatarbasierter Bekleidungsdesign-Software haben wir unsere Strahlenschutzkleidung NEU GESTALTET, um eine überlegene Passform für ALLE medizinischen Fachkräfte zu bieten.

Diese fortschrittliche Technologie hat es uns ermöglicht, Körperabdeckung und Ergonomie genau zu analysieren und sicherzustellen, dass unsere Kleidung optimalen Schutz bietet, ohne Komfort oder Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen.

Die präzise Passform reduziert die Belastung bei langen Schichten, während die verbesserte Abdeckung maximale Sicherheit in strahlungsintensiven Umgebungen gewährleistet. Das Ergebnis: Unser innovativer Ansatz hat zur Entwicklung überlegener Strahlenschutzkleidung geführt, die auf die spezifischen Bedürfnisse der im Gesundheitswesen Tätigen zugeschnitten ist.

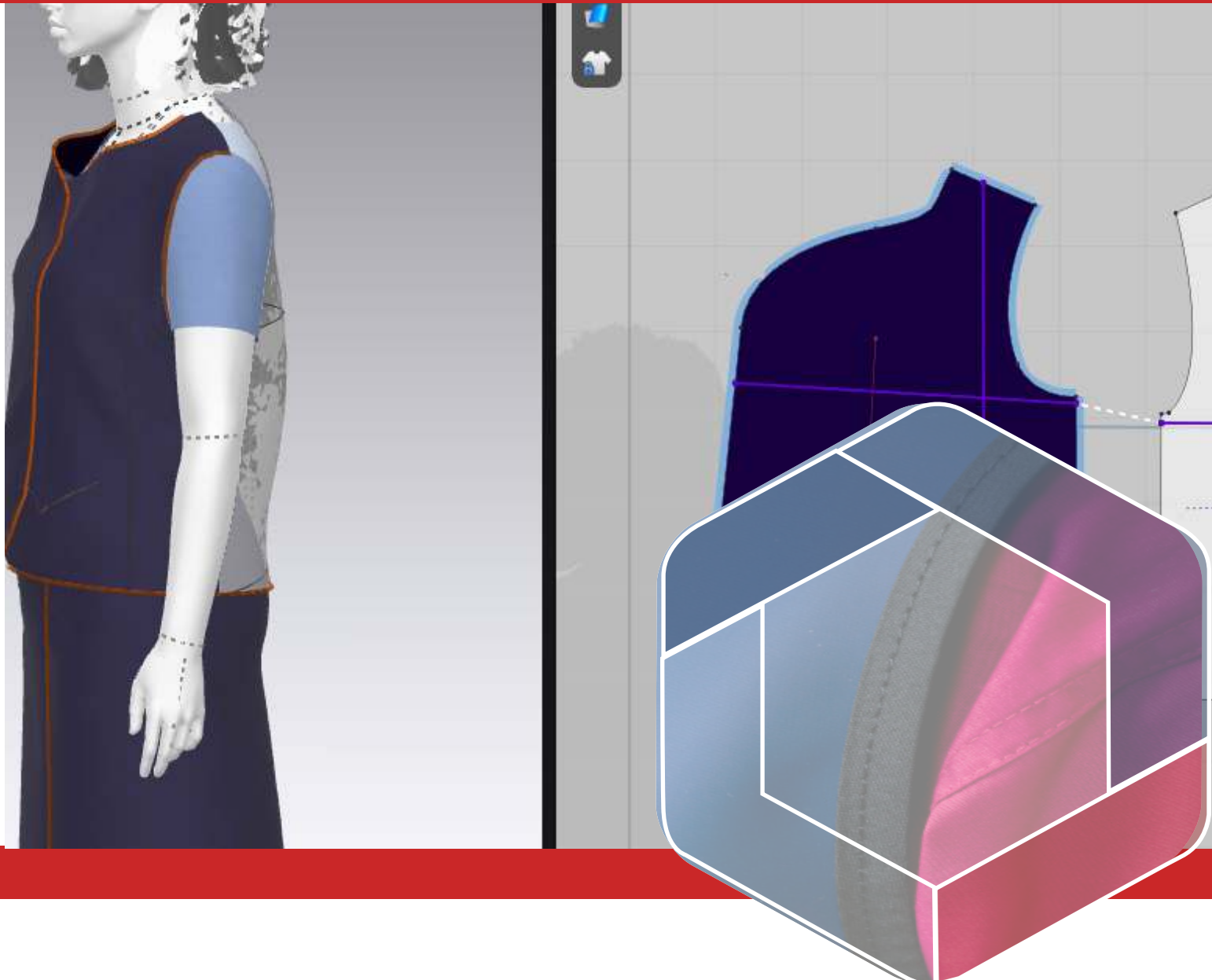

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT



Die VXR-Schürzenreihe bietet moderne Strahlenschutzkleidung, die Ihren aktiven Arbeitstag mit außergewöhnlicher Leistung unterstützt.

Höchster Komfort wird durch in die Rückenteile eingenähtes Gummiband erreicht und gewährleistet eine optimale Passform beim längeren Tragen.

Diese Schürzen eignen sich ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen nur eine frontale Strahlenexposition auftritt, und bieten maximalen Komfort und eine ausgezeichnete Passform für den Nutzer.

✓ Optionale schützende Rückenteile erhältlich.

✓ Die VXR-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

85	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25	BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35	BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5	
120	XL				
	XXL				

WEITERE LÄNGEN UND GRÖSSEN
ERHÄLTlich



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

Die VXR-2-Schürzenreihe bietet moderne Strahlenschutzkleidung, die sich leicht verschließen lässt.

Diese Schürzen eignen sich ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen nur eine frontale Strahlenexposition auftritt, und bieten maximalen Komfort und eine ausgezeichnete Passform für den Nutzer.

- ✓ Vorne einfach zu verschließen, was ein einfaches Ausziehen ermöglicht
- ✓ Optionale schützende Rückenteile erhältlich.
- ✓ Die VXR-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014

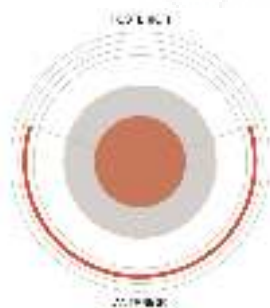

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

			FRONT	BACK	LEAD-LT
85	XS	SMALL			
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25	BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35	BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5	
120	XL				
	XXL				

WEITERE LÄNGEN UND GRÖSSEN
ERHÄLTICH

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

Unsere PXR-SC-Schürze ist eine Neukonstruktion des klassischen Tabard-Designs und bietet erhöhten Komfort und Passform im Achselbereich.

Erhältlich in mehreren Konfigurationen, einschließlich Designs mit einfachem oder doppeltem Schulterclip, gewährleistet sie ein anpassbares Erlebnis, das auf individuelle Vorlieben zugeschnitten ist.

Dieses unverzichtbare Stück im Bleischürzen-Sortiment ermöglicht es Abteilungen, eine vielseitige Auswahl vorzuhalten, die einer Vielzahl von Mitarbeitern gerecht wird und zugleich zuverlässigen Strahlenschutz bietet.


- ✓ Verschiedene Verschlussarten erhältlich, einschließlich eines höhenverstellbaren, elastischen Gürtels. Die PXR-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014.



HINTERE
SCHNALLEN
SERIENMÄSSIG



Option mit
elastischem Gürtel

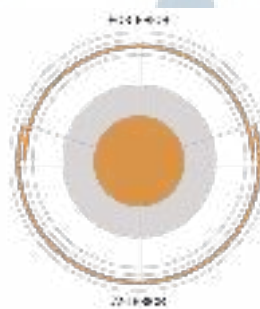

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

STANDARDLÄNGEN (cm)	STANDARDGRÖSSEN	ARMAUSSCHNITTE	BLEIGLEICHWERT	KERNMATERIALIEN
85	XS	SMALL	FRONT	BACK
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35
110	L		0.5 mm	0.5
120	XL			
130	XXL			

SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTICH



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

Unsere PXR-SC-Schürze ist eine Neukonstruktion des klassischen Tabard-Designs und bietet erhöhten Komfort und Passform im Achselbereich.

Erhältlich in mehreren Konfigurationen, einschließlich Designs mit einfachem oder doppeltem Schulterclip, gewährleistet sie ein anpassbares Erlebnis, das auf individuelle Vorlieben zugeschnitten ist.

Dieses unverzichtbare Stück im Bleischürzen-Sortiment ermöglicht es Abteilungen, eine vielseitige Auswahl vorzuhalten, die einer Vielzahl von Mitarbeitern gerecht wird und zugleich zuverlässigen Strahlenschutz bietet.


- ✓ Verschiedene Verschlussarten erhältlich, einschließlich eines höhenverstellbaren, elastischen Gürtels. Die PXR-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014.



HINTERE
SCHNALLEN
SERIENMÄSSIG



Option mit
elastischem Gürtel

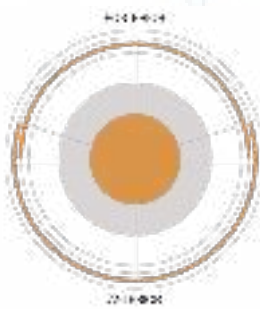

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

STANDARDLÄNGEN (cm)	STANDARDGRÖSSEN	ARMAUSSCHNITTE	BLEIGLEICHWERT	KERNMATERIALIEN
85	XS	SMALL	FRONT	BACK
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35
110	L		0.5 mm	0.5
120	XL			
130	XXL			

LEAD-LT

BILAYER-ET

BILAYER-LF

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT




Die WXR-F-Schürze ist ein voll langes Kleidungsstück mit überlappenden Zonen an der Vorderseite, das bei korrekter Überlappung das angegebene Schutzniveau liefert.

Dieses innovative Design reduziert den Bedarf an überschüssigem Kern- material und bietet dennoch eine umfassende Abdeckung von 60 % des Körperrumfangs.

The unique panelling simplifies wear, making it a comfortable and efficient choice for those requiring full protection without the added bulk. Ideal for extended use, this apron

- ✓ Die vorderen Abschnitte haben Bereiche, die sich überlappen, um den angegebenen Schutz zu erreichen, wodurch das Kleidungsstück ein geringeres Gewicht haben kann.
- ✓ Die WXR-F-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014.

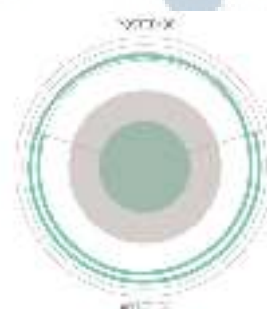

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

STANDARDLÄNGEN (cm)	STANDARDGRÖSSEN	ARMAUSSCHNITTE	BLEIGLEICHWERT	KERNMATERIALIEN
85	XS	SMALL	FRONT	BACK
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35
110	L		0.5 mm	0.5
120	XL			
130	XXL			

SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTICH



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

R


Unsere WXR-Schürze ist auf erhöhten Schutz ausgelegt und bietet eine doppelte Abdeckung dort, wo die Schürze überlappt.

Die Variation der Überlappung gewährleistet eine maßgeschneiderte Passform für unterschiedliche Körperformen, während mehrere Armausschnittgrößen den Schutz im Achselbereich optimieren.

Der serienmäßige elastische Gürtel ermöglicht es, das Gewicht der Schürze von den Schultern zu nehmen, was den Komfort bei längerem

- ✓ Leicht anzuziehen.
- ✓ Option für unterschiedliche Schutzniveaus in Vorder- und Rückenteilen.
- ✓ Die WXR-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014

Überlappung

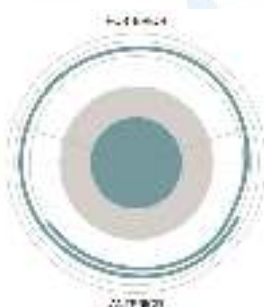

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

STANDARDLÄNGEN (cm)	STANDARDGRÖSSEN	ARMAUSSCHNITTE	BLEIGLEICHWERT	KERNMATERIALIEN
85	XS	SMALL	FRONT	BACK
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35
110	L		0.5 mm	0.5
120	XL			
130	XXL			

LEAD-LT

BILAYER-ET

BILAYER-LF

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT



Das TXR-W LITE -Design ist eine Modifikation des TXRW-Designs und bietet alle Designvorteile und die Passform des Basismodells.

Es wurde NEU GESTALTET, um die Überlappung an der Vorderseite zu reduzieren, was bis zu 15 % des Gesamtgewichts des TXRW einspart. Während die TXR-W-Designs mehr Flexibilität für die Anpassung an eine Reihe unterschiedlicher Personen bieten, ist das TXRW- LITE besser für diejenigen geeignet, die eine persönliche Bleischürze benötigen.

- ✓ Optional unterschiedliche Schutzniveaus in Vorder- und Rückseite.
- ✓ Die TXR-W-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014.

K

STANDARD
WICKEL-
KILT



KXR-F



STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

WEITERE LÄNGEN UND GRÖSSEN
ERHÄLTICH



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

Das TXR-W-Design ist Teil eines zweiteiligen Schutzkleidungsstücks, das das Gewicht gleichmäßig zwischen Schultern und Hüften verteilt und den Komfort beim längeren Tragen erhöht.

Sein überlappendes Design bietet doppelten Schutz über vitalen Bereichen.

Als eines unserer beliebtesten Designs wurde das TXR-W für eine bessere Passform im Armausschnittbereich **NEU GESTALTET** und bietet verbesserten Komfort und Bewegungsfreiheit für alle, die zuverlässigen, komfortablen Strahlenschutz suchen.


- ✓ Die ca. 30 cm große Überlappungszone ermöglicht es dem TXR-W, eine Reihe von Größen aufzunehmen.
- ✓ Optional unterschiedliche Schutzniveaus in Vorder- und Rückseite.
- ✓ Die TXR-W-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



K
STANDARD
WICKEL-
KILT



KXR-F

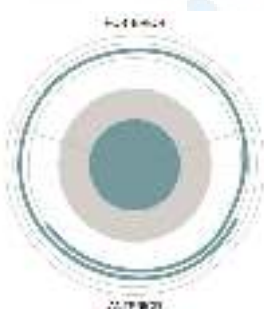

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

WEITERE LÄNGEN UND GRÖSSEN
ERHÄLTICH

NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT



Das TXR-B-Design ist Teil eines zweiteiligen Schutzkleidungsstücks, das das Gewicht gleichmäßig zwischen Schultern und Hüften verteilt und den Komfort beim Tragen erhöht.

Es wurde für eine bessere Passform im Armausschnittbereich NEU GESTALTET und sorgt mit Hunderten verfügbaren Kombinationen für eine perfekte Passform für Männer und Frauen.

Ein einzigartiges Merkmal des TXR-B ist sein elastischer Rücken, der eine stützende und eng anliegende Passform bietet und es zu einem der komfortabelsten Designs in unserem Sortiment macht.


- ✓ Optional unterschiedliche Schutzniveaus in Vorder- und Rückseite
- ✓ Die TXR-B-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



STANDARD
WICKEL-
KILT



Überlappung

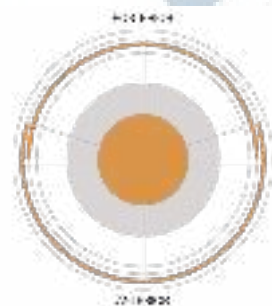

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

WEITERE LÄNGEN UND GRÖSSEN
ERHÄLTICH



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com


NEU GESTALTET FÜR besseren Schutz UND EIN GERINGERES GEWICHT

Das TXR-F-Design ist Teil eines zweiteiligen Schutzkleidungsstücks, das das Gewicht zwischen Schultern und Hüften verteilt und den Komfort für den Träger maximiert.

Its overlapping design meets the requirements of IEC 61331-3:2014, ensuring fully labelled protection when properly overlapped.

Das TXR-F wurde für eine bessere Passform im Armausschnittbereich NEU GESTALTET, mit Hunderten verfügbaren Kombinationen, um eine perfekte Passform für Männer und Frauen zu gewährleisten.

- ✓ Optional unterschiedliche Schutzniveaus in Vorder- und Rückseite.
- ✓ Die TXR-F-Schürzen sind typgeprüft und zertifiziert gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014

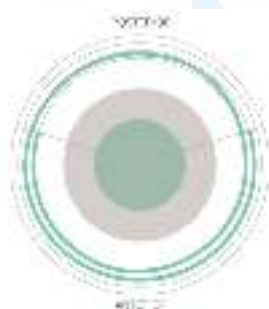

KXR-F

FULL WRAP KILT
WITH HALF THICKNESS IN THE
FRONT PANELS

STANDARDLÄNGEN (cm) STANDARDGRÖSSEN ARMAUSSCHNITTE BLEIGLEICHWERT KERNMATERIALIEN

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

WEITERE LÄNGEN UND GRÖSSEN
ERHÄLTICH

SCHILDDRÜSENSCHUTZ



magnetc



TPV



TPD



TPB

ZUSATZAUSSTATTUNG



SCATTER CAP LIGHT ÄRMEL MINI-ÄRMEL CRICKET-PADS



OPTIONALER FUSSSCHUTZ

PERSONALISIERUNG



STICKEREI TASCHE TASCHEN-STICKEREI



AUSTAUSCHBAR
KLETT-AUSWEIS



TRANSPARENTE
AUSWEISTASCHE

OPTIONALE EXTRAS



INNENTASCHE OUTLAST KILT-TASCHE INNENGÜRTEL





INTEGRIERBAR IN DIE MEISTEN BLEISCHÜRZE DIE
MEISTEN BLEISCHÜRZE DESIGNS BEWEGT SICH MIT DEM
ARM FÜR KORREKTE ABDECKUNG KORREKTE ABDECKUNG
DER ACHSELHÖHLE KOMFORTABEL KOMFORTABEL ZU
TRAGEN EINFACH EINFACH ANZULEGEN

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ SCHUTZ BEI CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN

Das flexible mammo-SHIELD® Brustschutz-Schild verleiht dem Träger in der Mitte Punkt der Strahlensicherheit, da einige Eingriffe Klinikpersonal in diesem anatomischen Bereich ionisierender Strahlung aussetzen können.

Hier kommt das mammo-SHIELD™ ins Spiel. Speziell entwickelt, um bequem unter dem Arm zu sitzen und sich mit dem Träger zu bewegen, um Schutz in diesem gefährdeten Bereich zu bieten.

ENTWICKELT MIT MEDIZINISCHEM FACHPERSONAL

Wir haben mit erfahrenen Orthopädiechirurgen zusammengearbeitet, um das mammo-SHIELD™ zu entwickeln – unsere Lösung für verbesserten Achselenschutz, die zusätzliche Sicherheit bietet.

Unser einfaches, aber robustes Design lässt sich nahtlos in die meisten Bleischürzen & -oberteile integrieren. Die flexible Konfiguration gewährleistet eine ausreichende Achselabdeckung in verschiedenen Armpositionen.

Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Rothband-Vertreter für weitere Informationen und eine Vorführung



Aufbewahrung

SCHIENEN



HA172




PSMAR



HA170



PS170

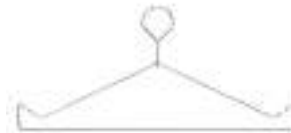

HA175C



HA175

SCHWENKARM



HA10KT



PS10KT



M10S



SKHK



HARODPS10



HA5K



ROTHBAND

WSR Medical Solutions Limited Unit 2
Hargreaves Mill, Hargreaves Street,
Haslingden, Lancashire BB4 5RQ

T. +44 (0) 1706 830086
E. sales@rothband.com

www.rothband.com
www.xray4vets.com

Alle in diesem Katalog enthaltenen Produktfotos, Farben und Designs dienen lediglich als Darstellung. Farb- und Designabweichungen können infolge des Druckprozesses und der Produktentwicklung auftreten.

Nach bestem Wissen wurde dieser Katalog sorgfältig zusammengestellt. Fehler, die infolge der Produktentwicklung auftreten, können nicht ausgeschlossen werden. Alle Marken, Logos und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2024 WSR Medical Solutions
Limited



SCANNEN



rothband.com